

科技增强慢性疾病护理计划 (PTEC)

居家 血压监控项目


用户手册



欢迎加入这项居家血压监控项目! 😊

欢迎您与我们一起进行科技增强慢性疾病护理计划 (PTEC) 居家血压管理。

在这个项目里, 您将能通过 定期监控自己的血压以及来自护理团队的远程医疗支持, 更好的了解自己的病情。

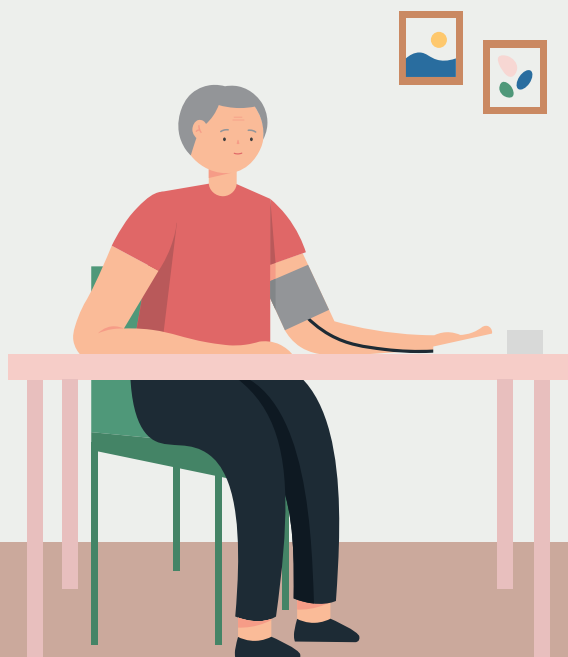

计划总览




当您加入这个项目,您的护理团队可能会跟您预约电话问诊。每次问诊需**10至20分钟**。



使用本项目所提供的血压检测仪器测量您的血压**每周至少一次**。请记得通过 Health Discovery+ 应用程序,将**每周的测量结果**传送给您的护理团队。您可与他人共用同一台血压检测仪器,但请**不要将他们的测量结果**通过手机应用程序传送给您的护理团队。



请按时服用护理团队配给您的药物,并遵循他们提供的饮食和运动的护理建议。

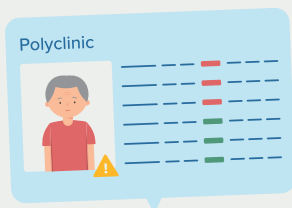

让我们开始吧!

请注意: 在测量您的血压**至少三十分钟前避免**进食、抽烟、运动及喝咖啡。



配对

1

安装 Health Discovery+ 应用程序并与血压监测仪器配对。


请参阅第 **6 至 9** 页以了解更多信息。

测量

2

用血压检测仪器测量您的血压。

请参阅第 **10 至 13** 页以了解更多信息。

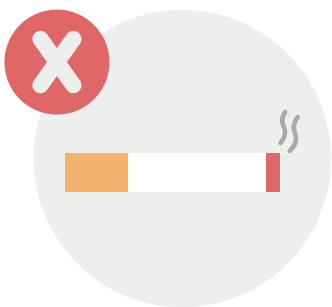

传送

3

把您的血压测量结果传送给护理团队。

请参阅第 **14 至 17** 页以了解更多信息。



第一步： 配对


您需要



可以上网的智能手机

手机操作系统:

- iOS 14 及以上
- Android 10 及以上

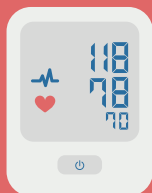


血压检测仪器

安装所提供的电池



您可扫描左侧的二维码或访问
<https://for.sg/bpmonitoringresources>
观看教学视频。

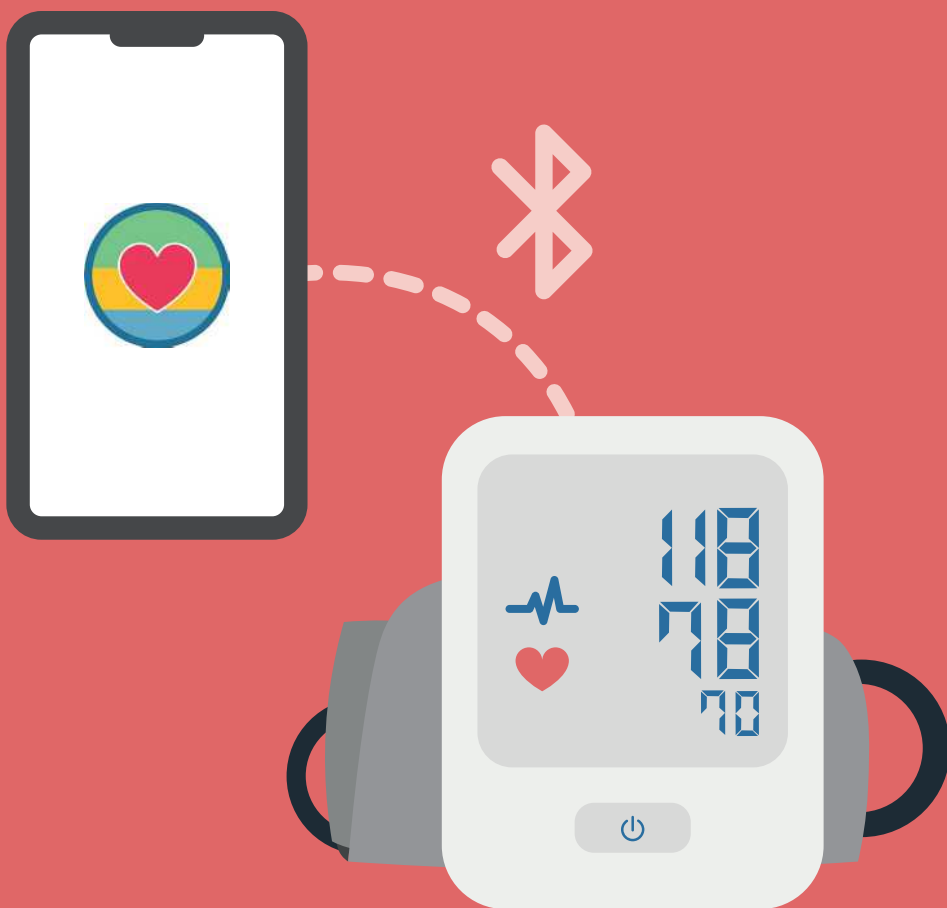

1.0 下载并安装应用程序




您可以从苹果 App Store 或 Google Play 商店下载应用程序。



如果您使用的是 **Android** 手机，请在安装应用程序时允许使用地点资料。

1.1 登录

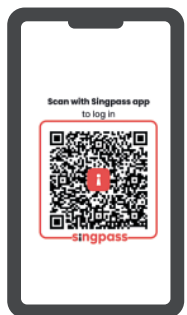

打开手机 Health Discovery+ 应用程序并按二维码，通过 Singpass 登录。

1.2 设置密码



设置4位数的密码，或设置生物识别（指纹/面部）。

1.3 启用蓝牙



在您手机的‘设置’菜单中将蓝牙启动。


1.4 选择仪器




点按主页右下角的‘设置’图标，
然后点按‘设备’。

选择设备‘A&D UA-651BLE’。

长按仪器上的‘START’按钮，直到‘Pr’出现在屏幕上。
当血压检测仪器的屏幕出现‘END’，表示配对已完成。
手机上会显示“已连接”。

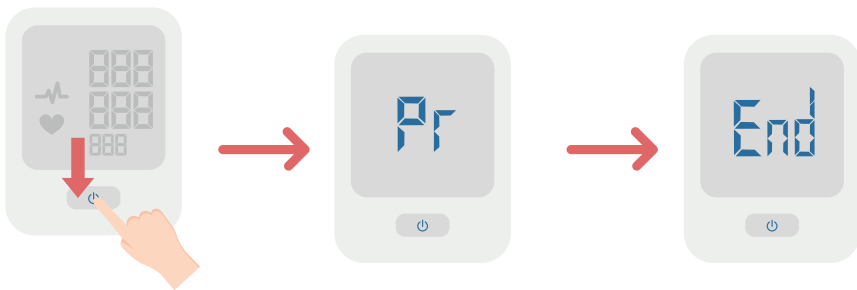

如果配对不成功

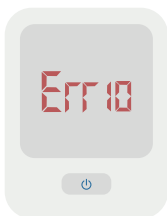


如果出现‘Err 10’，表示配对不成功。

请取出电池并重新装入，再重复以上步骤。

第二部： 测量

您需要

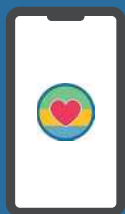

可以上网的智能手机

您的手机需安装 Health Discovery+ 应用程序。您的血压检测仪器 会与应用程序配对。



血压检测仪器


安装所提供的电池




您可扫描左侧的二维码或访问
<https://for.sg/bpmonitoringresources>
观看教学视频。



2.0 将血压袖套连接到血压检测仪器

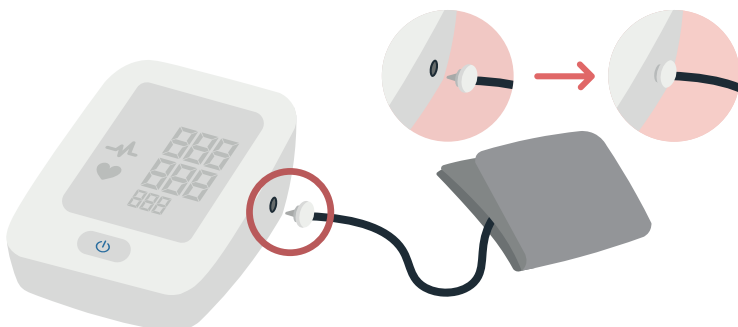

2.1 将袖套包裹住上臂

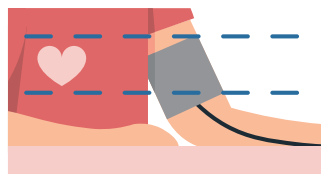


您的双脚应平放, 手臂应有支撑。

确保袖套与心脏处于同等高度。

将手臂穿过袖套并将袖套上滑到上臂。


将手心朝上, 确保袖套上的白点与您的无名指对齐。

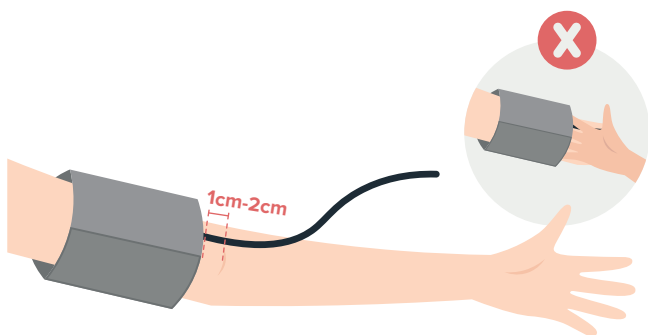

将袖套均匀包裹住上臂并拉紧, 位置在手肘1至2公分之上。

袖套和手臂之间的空隙能放入的手指不应超过两根。

2.2 打开 Health Discovery+ 应用程序

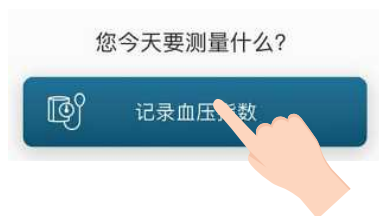


打开应用程序, 点击‘记录血压指数’。



选择‘自行输入’以便自行手动输入读数或者选择‘自动测量’以便通过蓝牙自动上传读数。

2.3 检测您的血压

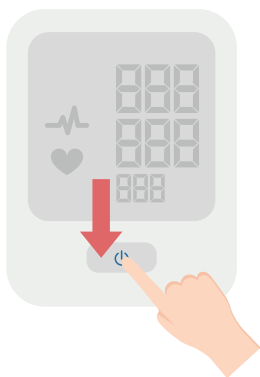

按‘Start’按钮, 以开始测量血压。

注意:检测血压时请不要说话并保持不动。

第三部： 传送

把您的血压测量结果传送给护理团队。

您需要



可以上网的智能手机

您的手机需安装Health Discovery+ 应用程序。您的血压检测仪器会与应用程序配对。



您可扫描左侧的二维码或访问
<https://for.sg/bpmonitoringresources>
观看教学视频。





3.0 传送测量结果



自动上传

请确保手机上的蓝牙和位置信息已打开。



1. 在测量了您的血压后，应用程序将自动同步记录测量结果。
2. 点按‘上传’查看测量结果。



手动上传

1. 在相关空格内输入您的血压读数。
2. 点按“上传”查看测量结果。

3.1 接收发自聊天机器人的短信

血压指数成功上传后，您会收到提示信息。

如有需要回复，请按照相关指示进行回复。



注意！ 测量结果**不是实时监控**，如果您的测量指数低于 100/ 50 mmHG 或高于 180/110 mmHG，请重新测量您的血压。如果您感到不适，或您的血压在30分钟与一小时后还低于 100/50 mmHG 或高于 180/110 mmHG，请马上寻求医疗帮助。

通知


我们会通过手机应用程序 Health Discovery+ 为您提供血压护理的相关信息,比如教育信息及指示以帮助您更好的管理自己的血压。

请仔细阅读相关信息并按指示进行操作。




建议

血压测量结果如有异常,您将得到应对建议。

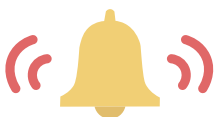

提醒

当您忘了测量血压,您将会收到提醒短信。

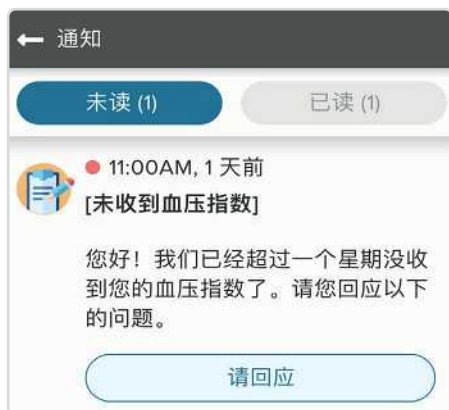

教育

您将会收到关于血压管理的小贴士。

Health Discovery+ 设置

1. 提醒服务




您可选择想要的日期和时间。

2. 转换语言



此应用程序支持中英文两种语言,如有需要,您可转换成您想要的语言。

3. 查询

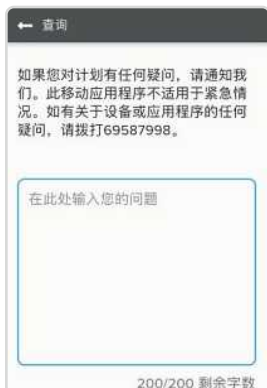

如果您对计划,设备或应用程序有任何疑问,请通过此功能通知护理团队。

注意: 这不适用于医疗建议或紧急情况。

常见问题 (FAQs)

问： 如果忘记 Singpass 密码怎么办？

答： 如果您之前已完成 Singpass 的认证, 您可以尝试以下解决方法：

1. 登录 Singpass 网站 <https://www.singpass.gov.sg/>
2. 在网页上方点击 'Log in'
3. 选择 'Reset Password' 然后输入您的信息, 按照指示通过手机短信完成一次性密码验证
4. 按照网站上的指示完成密码重置。

如有需有, 您可联系Singpass 服务支持热线: 6335 3533。

工作时间：星期一至星期五 (9:00AM至6:00PM)。

联系中心在星期六, 星期日与公共假日休息。

问： 如果应用程序无法操作, 我应该怎么做？

答： 您可以尝试以下解决方法：

- 强行退出应用程序并重新启动它,
- 重启您的手机, 或
- 查看应用程序是否有更新版。

如果应用程序还是无法正常操作, 请拨打我们的技术服务支持热线 6958 7998。

问： 如果我的血压检测仪器停止操作呢？

答： 您可以尝试以下解决方法：

- 更换电池, 或
- 将电池取出再重新装入, 或
- 重启血压检测仪器。

如果仪器还是无法正常操作或无法与应用程序配对, 请拨打我们的技术服务支持热线 **6958 7998**。

问： 如果我的血压检测仪器损坏了, 是否能更换?如果我的仪器损坏了而必须 购买新的, 我是否仍能以相同的价格购买?

答： 如果您的仪器出现非人为损坏的性能故障, 并还在一年保修期内, 请拨打 技术支持热线寻求帮助。

联系我们

如果您想了解更多关于这个居家血压监控项目的信息,重新安排您的电话问诊,或计划购买更多药物,请联络您就诊的综合诊疗所的联系中心。



技术服务支持热线

6958 7998

星期一至星期五: 9:00AM 至 6:00PM

联系中心在星期日与公共假日休息

联系中心

国立健保集团综合诊疗所

6355 3000

新加坡保健集团综合诊疗所

6643 6969

国立大学综合诊疗所

6908 2222

星期一至星期五: 8:00AM 至 4:30PM

星期六: 8:00AM至12:30PM

联系中心在星期日与公共假日休息



您可扫描 左侧的二维码或访问

<https://for.sg/bpmonitoring>

观看教学视频。



如果您的设备或手机应用程序有任何问题，请在**周一至周五 (公共假期除外)**
9:00AM 至 6:00PM 拨打我们的IT热线
6958 7998 以寻求帮助。

主办机构:



协办机构:

